

IRTD 显示器

连接KAYE IRTD的独立显示器



Kaye IRTD显示器是一款带有触摸屏的独立产品，这一先进的显示单元可以与两个Kaye IRTD参考铂电阻无缝连接，并清晰地显示实时温度数据。Kaye IRTD显示器配备4.3英寸触摸屏，直观地显示两个IRTD读数，用户可以轻松地监控温度。显示器还可以显示两个IRTD的温度差(Delta)，从而实现快速准确的分析。同时支持两种类型的IRTD连接线，确保与您的设置相兼容。

Kaye IRTD显示器支持三种温度单位（摄氏度/华氏度/开尔文），满足您特定的温度测量需求。


此外，该显示器可更改IRTD设置，如地址和单元。显示单元包含内部存储器，可用于记录数据，提高效率，并且支持单个或双个IRTD配置。设备采用外部供电，也可连接5V USB移动电源供电，设置灵活多变。

Kaye IRTD显示器可通过USB固件进行更新，确保您可以使用最新的功能。

无论您是在实验室、工厂，还是在其它需要精确温度监测的环境中工作，该款显示器都将简化您的工作流程，并增强您的测量和监测能力。

特性&优势

- 4.3英寸触摸屏
- 可显示两个Kaye IRTD参考铂电阻的读数，支持三种分辨率
- 可显示两个IRTD的温度差
- 可选择采样频率5至60秒
- 支持两种类型的IRTD连接线
- 支持三种温度单位（摄氏度/华氏度/开尔文）
- 支持更改IRTD设置（地址、单元）
- 内部存储可记录1个或2个IRTD数据
- 采用外部供电，如有需要也可用5V USB移动电源供电
- 可通过USB对控制器进行固件更新
- 提供USB软件接口
- 蜂鸣器、内置时钟、内部存储器
- 电气安全认证

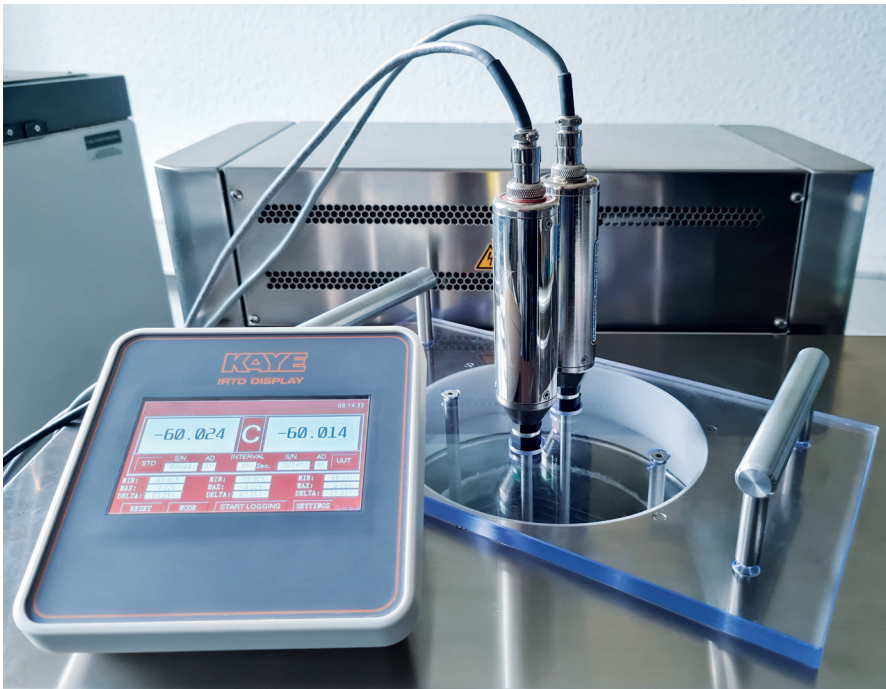

Kaye Representative contact:
www.kayeinstruments.com/en/contact

Request a demo:
www.kayeinstruments.com/en/demo

EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA AND ASIA
Amphenol Advanced Sensors Germany GmbH
Sinsheimer Strasse 6
D-75179 Pforzheim
T: +49 (0) 7231-14 335 0
F: +49 (0) 7231-14335 29
Email: kaye@amphenol-sensors.com

USA/AMERICAS
Amphenol Thermometrics, Inc.
967 Windfall Road
St. Marys, PA 15857
T: +1(814) 834-9140
F: +1(814) 781-7969
Email: kaye-us@amphenol-sensors.com

INDIA
Amphenol Interconnect India Pvt Ltd.
Plot no. 6, Survey No.64 | Software Units layout
MAHAVEER TECHNO PARK
Hitech City, Madhapur | Hyderabad,
Telangana – 500081 | T: +91 40 33147100
Email: kaye-india@amphenol-sensors.com

中国
安费诺（常州）连接系统有限公司
江苏省常州市武进高新区西湖路8号
津通工业园10A厂房，213164
T: 0086-519-83055197



SUBSIDIARY OF AMPHENOL

www.kayeinstruments.com

免责声明：文件中的信息是基于我们目前的测试、知识和经验的结果。由于产品应用中可能产生的影响，建议您自行测试、检查及追踪。某个产品或产品的某项性能只适用于当前测试环境，不能保证适用于所有环境或永久适用。因此，法律允许范围内免除责任。任何第三方专利或现行法律法规，必须由用户自己遵守并自行承担。

© 2023 Amphenol Corporation. All Rights Reserved. 版权归Amphenol公司所有。规格如有变动，恕不另行通知，文件中所提的其他公司名称或产品名称均为其所有者的商标或注册商标。

AAS-CSK-14001-CN